

37 Serie



12-02-2018 - V1.2

Gebruikershandleiding

Algemeen:

Deze Optiscan alarmeert wanneer iemand aanstalten maakt om het bed te verlaten.

Installatie en gebruik:

Plaats de sensor, kijkend richting het bed, op de vloer. (zie tekening). Het geniet sterk de voorkeur deze op minimaal op 2 meter afstand van het bed te plaatsen. Zet de sensor onder een tafel, stoel of kastje zodat men hier niet over kan struikelen. Steek de connector van de kabel in het verpleegoproepsysteem en (mits aanwezig) de adapter in het stopcontact.


LET OP: Indien de Optiscan uit het los gekoppeld is geweest heeft deze ongeveer 5 minuten nodig om op te warmen en kan gedurende deze tijd niet gebruikt worden.



Figuur 1: Sensor Plaatsing

Aanzetten:

1. Zet de sensor aan door achterop de steun de schakelaar op 1 te zetten (0 is uit).
2. Verlaat de kamer.

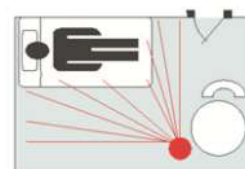

Figuur 2: Kijkhoek sensor

Note: De sensor zal de eerste 15 sec. na inschakeling met de schakelaar nog geen alarmen doorzenden. Dit om een vals alarm bij inschakelen te voorkomen.

Uitzetten:

1. Loop de kamer in en zet de sensor uit.
2. Stel evt. het alarm op het verpleegoproepsysteem / zorgtelefoon af.

Extra instelbare opties

De bekabelde Optiscan sensor is voorzien van 8 dipswitches welke een eigen functionaliteit hebben die u naar wens kunt gebruiken.

Dipswitch 1	Schakeltijd relais
	OFF: Relais schakelt 1 seconden bij alarm (Standaard)
	ON: Relais schakelt 3 seconden bij alarm
Dipswitch 2	Inloopvertraging
	OFF: Geen inloopvertraging (Standaard)
	ON: Inloopvertraging van 5 seconden
Dipswitch 3 & 4	Gevoeligheid sensor (alleen in overleg met leverancier aanpassen)
	OFF 3, OFF 4: Standaard gevoeligheid
	ON 3, OFF 4: Zeer gevoelig
	OFF 3, ON 4: Minder gevoelig
	ON 3, ON 4: Zeer ongevoelig (vraag naar de specifieke toepassing)
Dipswitch 5	Teststand
	OFF: Sensor werkt met 15 seconde functie
	ON: Sensor alarmeert bij iedere beweging en negeert 15 seconde functie
Dipswitch 6	Niet gebruiken
Dipswitch 7	LED kleur tijdens detectie
	OFF: Groene LED
	ON: Rode LED
Dipswitch 8	Schakelaar
	OFF: Optiscan staat altijd aan
	ON: Schakelaar op de Optiscan aanwezig

Productvarianties:

3710 DAZA Optiscan (Verbreek) op steun met kabel
3714 DAZA Optiscan (verbreek) op steun met kabel
3715 DAZA Optiscan (Verbreek) op steun met kabel
3720 DAZA Optiscan (Maak) op steun met kabel
3720 DAZA Optiscan (Maak) op steun met kabel
3721 DAZA Optiscan (Maak) op steun met kabel en adapter
3721 DAZA Optiscan (Maak) op steun met kabel en adapter